



FROM CONFIDENCE TO TRUST



@APT Medical

Endereço: Room 601, Building B, Tongfang Information Port, No.11
Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R. of China

Email: international@aptmed.com TEL: +86 755-83591013

PN: Pt-Product Catálogo-420X285X20P-20240603



www.aptmed.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Cardiologia Intervencionista

Bainha • Fio-Guia • Cateter • Cateter-Balão • Acessórios



SOBRE A APT MEDICAL

APT Medical, uma fabricante líder é fornecedora de dispositivos médicos de Intervenção Vascular e EP, está empenhada no avanço do campo médico intervencionista utilizando tecnologias e inovações.

Desde a sua criação em 2002, a APT persiste no investimento contínuo em Pesquisa e Desenvolvimento, que lançaram as bases para o seu sucesso na expansão sustentável da tecnologia e crescente participação do mercado. APT Medical colabora com médicos, hospitais e universidades para desenvolver produtos e soluções inovadoras que permitam aos médicos melhorar os cuidados dos pacientes.

O crescente portfólio de produtos da APT Medical abrange a Eletrofisiologia, a Cardiologia, as Intervenções Neurológicas e Periféricas, que constantemente incute confiança aos médicos ao enfrentar os desafios clínicos; pensando na inovação, a APT Medical é dirigida pela sua visão, ser líder no campo intervencionista, protegendo ao mesmo tempo a saúde da humanidade.

CONTEÚDO

Bainha

- Introdutor Hemostático Braidin™ 2
- Bainha Guiamento Braidin™ L 3

Fio-guia

- Fio-guia Hidrofilizado Blackeel™ 4
- Fio-guia para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) Anyreach 6

Cateter

- Cateter Angiográfico Hidrofilizado Angiointer™ 8
- Cateter Guiamento March™ 10
- Cateter Guiamento de Extensão Expressman™ 11
- Microcateter Elong™ 12
- Cateter de Aspiração Sniffer™ 13

Cateter-Balão

- Cateter-Balão de Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) SC CONQUEROR™ 14
- Cateter-Balão de Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) NC CONQUEROR™ 15
- Cateter-Balão de Aprisionamento CONQUEROR™ Trap 16

Acessório

- Conector em Y SealingPro™ 17
- Dispositivo de Insuflação Enlarger™ 17
- Kit de Laços Horsepole™ 18

Outros


- Conjunto 6.5F Especial 19

Braidin™

Introdutor Hemostático

FINO PORÉM FORTE

Introdutor Hemostático Braidin™ com estrutura de rede metálica trançada é projetado para fornecer uma parede mais fina e um diâmetro externo menor, e mesmo assim mantendo a excelente resistência à torção, ajudando-o a superar o primeiro passo nos procedimentos transradiais.

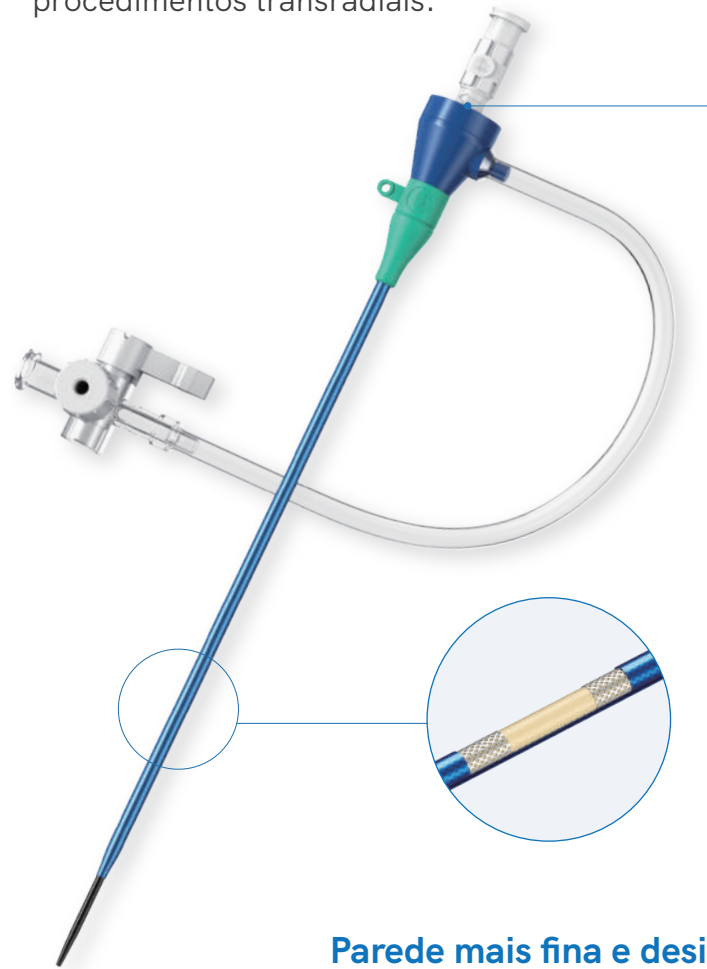

Válvula hemostática melhorada

- Para minimizar hemorragias e aspiração de ar

Inserção suave e fácil



- A transição suave e uniforme reduz a resistência à punção e a incidência de complicações
- Permitem uma fácil entrada nos vasos
- Revestimento hidrofílico distal para melhorar a fluidez

A estrutura trançada em rede metálica oferece uma ótima resistência à torção

- Eixo trançado para fornecer uma excelente resistência à torção e um diâmetro externo bem pequeno

Parede mais fina e design do lúmen interno maior

- O design da parede fina reduz o diâmetro externo da bainha e reduz ao mínimo o desconforto e dor dos pacientes
- Braidin™ especial 6.5F oferece um diâmetro externo semelhante à bainha do introdutor convencional 6F, mas com um diâmetro interno maior de 0.5F

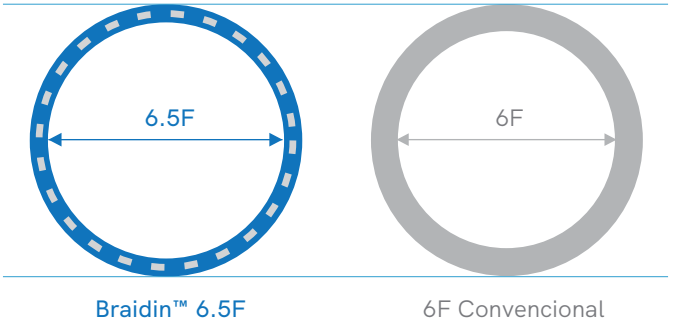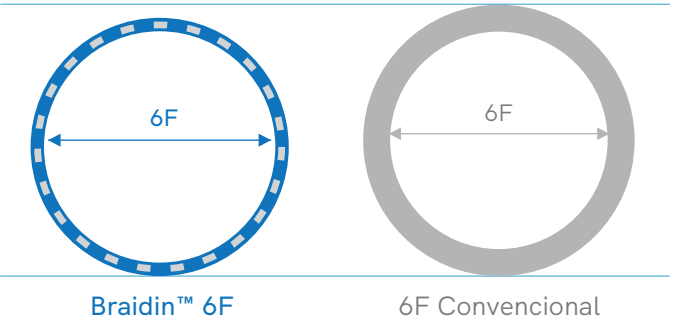

Tornando a Cirurgia Torácica acessível através da artéria radial e distal

- Facilita a hemostase e permite o movimento livre da mão
- Reduz significativamente as taxas de complicação em relação ao acesso Transfemural

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Bainha radial

Tamanho escala (Fr)	Agulha	Bisturi	Introdutor com Bainha				Introdutor com Bainha e Ponta de Marcador	
			7cm	11cm	15cm	Fio-Guia de Metal	25cm	Fio-Guia de Metal
4F	22G 45mm	11P	98040070	98040110	98040150	Straight 0.025" 45cm	98040250	Straight 0.025" 80cm
5F	22G 45mm	11P	98050070	98050110	98050150	Straight 0.025" 45cm	98050250	Straight 0.025" 80cm
6F	22G 45mm	11P	98060070	98060110	98060150	Straight 0.025" 45cm	98060250	Straight 0.025" 80cm
6.5F	22G 45mm	11P	98060071	98060111	98060151	Straight 0.025" 45cm	98060251	Straight 0.025" 80cm
7F	22G 45mm	11P	98070070	98070110	98070150	Straight 0.025" 45cm	98070250	Straight 0.025" 80cm
4F	22G 45mm	11P	860400701	860401101	860401501	Straight 0.025" 45cm	860402502	Straight 0.025" 80cm
5F	22G 45mm	11P	860500701	860501101	860501501	Straight 0.025" 45cm	860502502	Straight 0.025" 80cm
6F	22G 45mm	11P	860600701	860601101	860601501	Straight 0.025" 45cm	860602502	Straight 0.025" 80cm
6.5F	22G 45mm	11P	869600701	869601101	869601501	Straight 0.025" 45cm	869602502	Straight 0.025" 80cm
7F	22G 45mm	11P	860700701	860701101	860701501	Straight 0.025" 45cm	860702502	Straight 0.025" 80cm
4F	20G 40mm	-	860400769	860401169	860401569	3mm J 0.025" 45cm	860402570	3mm J 0.025" 80cm
5F	20G 40mm	-	860500769	860501169	860501569	3mm J 0.025" 45cm	860502570	3mm J 0.025" 80cm
6F	20G 40mm	-	860600769	860601169	860601569	3mm J 0.025" 45cm	860602570	3mm J 0.025" 80cm
6.5F	20G 40mm	-	869600769	869601169	869601569	3mm J 0.025" 45cm	869602570	3mm J 0.025" 80cm
7F	20G 40mm	-	860700769	860701169	860701569	3mm J 0.025" 45cm	860702570	3mm J 0.025" 80cm

Bainha femoral

Tamanho escala (Fr)	Agulha	Bisturi	Introdutor com Bainha			Introdutor com Bainha e Ponta de Marcador	
			11cm	15cm	Fio-Guia de Metal	25cm	Fio-Guia de Metal
4F	18G 70mm	11P	98040111	98040151	3mm J 0.035" 45cm	98040251	3mm J 0.035" 80cm
5F	18G 70mm	11P	98050112	98050152	3mm J 0.038" 45cm	98050252	3mm J 0.038" 80cm
6F	18G 70mm	11P	98060112	98060152	3mm J 0.038" 45cm	98060252	3mm J 0.038" 80cm
6.5F	18G 70mm	11P	98060113	98060153	3mm J 0.038" 45cm	98060253	3mm J 0.038" 80cm
7F	18G 70mm	11P	98070111	98070151	3mm J 0.038" 45cm	98070251	3mm J 0.038" 80cm
8F	18G 70mm	11P	98080110	98080150	3mm J 0.038" 45cm	98080250	3mm J 0.038" 80cm

Braidin™ L

Bainha Guiamento

Bainha Guiamento Braidin™ L herda a qualidade premium do introdutor por hemostase do APT Medical, apresenta uma estrutura trançada e uma ponta marcada para fornecer resistência à torção, visibilidade e suporte superiores, é amplamente utilizada nas intervenções periféricas e nos procedimentos venosos.



Estrutura trançada



- Facilita um excelente suporte, torqueabilidade e resistência superior à torção
- Apresenta paredes finas e um diâmetro externo para reduzir ao mínimo a tensão dos vasos sanguíneos e as complicações no local de acesso

Transição suave entre a bainha e o dilatador

- Para um avanço suave e uma inserção mais simples

Torneirinha 3 vias


Furos duplos laterais

- Reduzir ao mínimo a cavitação

Ponta atraumática

- Ponta do dilatador arredondada para evitar danos nos vasos

Curvas múltiplas disponíveis para requisitos clínicos diferentes

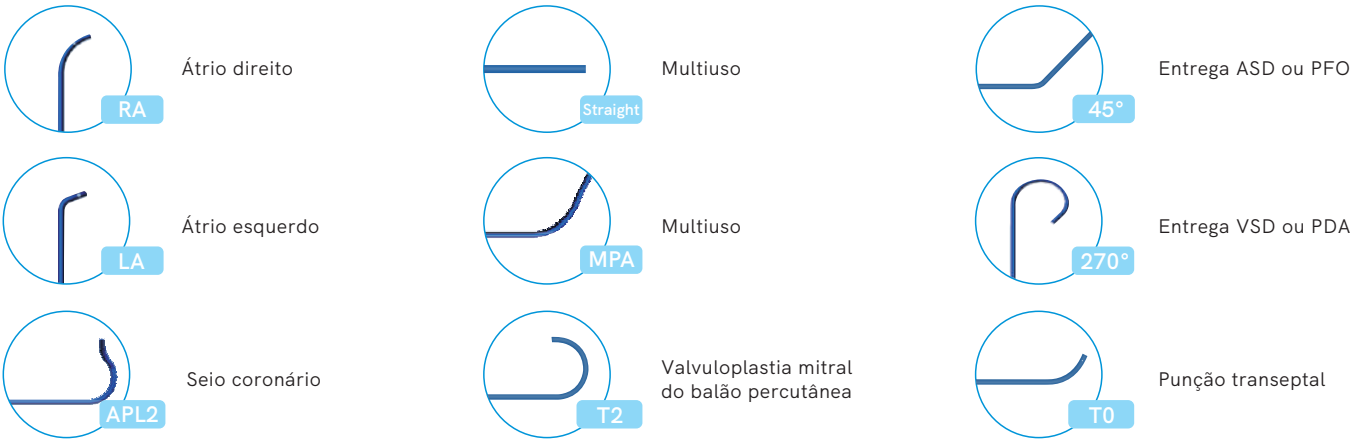

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Curva	Comprimento	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	12F	14F	16F	18F
270°	85cm	890408501	890508501	890608501	890708501	890808501	890908501	891008501	891208501	891408501	891608501	891808501
45°		890408500	890508500	890608500	890708500	890808500	890908500	891008500	891208500	891408500	891608500	891808500

• Sem Fio-Guia

Curva	Comprimento	5F	5.5F	6F	6.5F	7F	8F	9F	10F	12F	14F	Fio-guia
Straight	90cm	95050900	95050901	95060900	95060901	95070900	95080900	-	-	-	-	No
	50cm*	890505000	-	890605000	-	890705000	890805000	890905000	891005000	891205000	891405000	Fio-guia hidrofilizado
	50cm**	890505001	-	890605001	-	890705001	-	-	-	-	-	
	90cm*	890509000	-	890609000	-	890709000	890809000	890909000	891009000	891209000	891409000	
	90cm**	890509001	-	890609001	-	890709001	-	-	-	-	-	

- 50cm* 5-8F com 3mmJ, 0,038" 150cm; 9-14F com 3mmJ, 0,038" 180cm
- 50cm** e 90cm** com 2mmJ, 0,025" 180cm
- 90cm* 5-14F com 3mmJ, 0,038" 180cm

Curva	Comprimento	4F	5F	6F	6.5F	7F	8F	10F	12F	Fio-guia
MPA	50cm	-	-	890605003	-	890705003	-	-	-	3mmJ, 0.038" 150cm
	130cm	-	890513001	890613001	-	-	-	-	-	2mmJ, 0.025" 300cm
	50cm	-	-	95060507	95060509	95070507	-	-	-	-
T2	45cm	-	-	890604500	-	890704500	890804500*	-	-	2mmJ, 0.025" 150cm
	60cm	-	-	890606000	-	890706000	890806000	891006000	891206000	3mmJ, 0.032" 150cm
APL2	50cm	95040501	95050501	-	-	-	-	-	-	-
	70cm	95070701	95050701	-	-	-	-	-	-	-

• 890804500* com 3mmJ, fio-guia de 0,032" 150cm

Curva	Comprimento	8F	8.5F	Fio-guia Hidrofilizado	Furos laterais
RA	62cm	890806200	890806203	3mmJ, 0.038" 150cm	-
		95080620	95080625	-	-
		95080624	95080622	-	2
LA	62cm	890806201	890806204	3mmJ, 0.038" 150cm	-
	80cm	890808000	890808002	3mmJ, 0.038" 180cm	-
	62cm	95080621	95080626	-	-
	62cm	95080628	95080629	3mmJ, 0.032" x180cm	2
T0	62cm	890806202	890806205	3mmJ, 0.038" 150cm	-
	80cm	890808001	890808003	3mmJ, 0.038" 180cm	-


* Furos duplos para curvas específicas

Blackeel™

Fio-Guia Hidrofilizado Nitinol

EXPERIMENTANDO UM DESLOCAMENTO LUBRIFICADO

Fio-Guia hidrofilico Nitinol Blackeel™ com ponta macia e atraumática e polímero misto de tungstênio para fornecer uma elasticidade superior, resistência à torção, controle de torque e alta visibilidade. O revestimento hidrofilizado durável do fio garante a passagem do poder lubrificante através de vasos tortuosos.

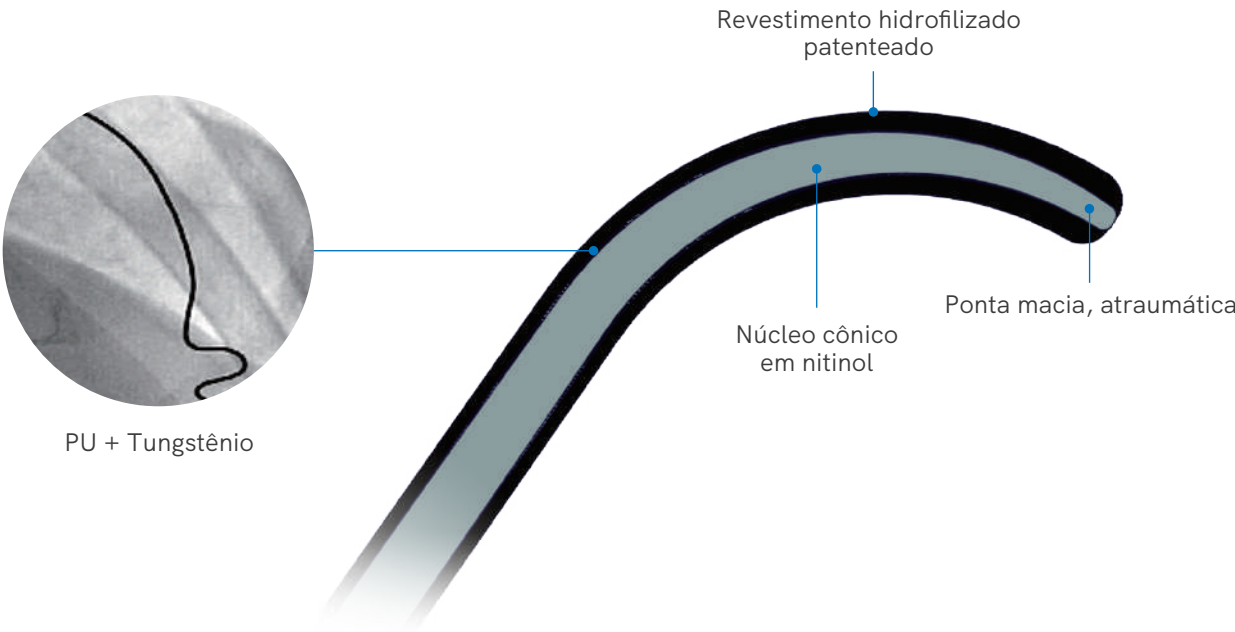

Prestações elevadas para uma variedade de casos

» **Excelente controle de torque**

O material elástico e o design integrado permitem uma resposta de torque 1:1 para fornecer rapidamente o fio-guia no vaso alvo

» **Visibilidade melhorada**

O polímetro misto de tungstênio garante uma melhor visibilidade com raios X e permite um posicionamento cuidadoso

» **Prestações duráveis e lubrificadas**

O revestimento hidrofilizado patenteado oferece um acesso durável e suave, possível mesmo em vasos tortuosos

» **Ponta macia e atraumática**

O design cônico garante uma ponta macia e atraumática para cruzar uma anatomia tortuosa

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Material de base	Nitinol
Diâmetro	0.025", 0.032", 0.035", 0.038"
Comprimento	50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm
Curva	A, S, R1.5mmJ, R2.0mmJ, R3.0mmJ
Nível de suporte	Macio, Padrão, Rígido, Extra rígido, Ultra rígido

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Padrão

Curva	Comprimento (cm)	0,025"/Padrão	0.032"/Padrão	0.035"/Padrão	0.038"/Padrão
A	50	10A12505	-	10A13505	-
	80	10A12508	-	10A13508	-
	120	10A12512	-	10A13512	10A13812
	150	10A12515	10A13215	10A13515	10A13815
	180	10A12518	10A13218	10A13518	10A13818
	220	10A12522	-	10A13522	10A13822
	260	10A12526	10A13226	10A13526	10A13826
Reto	50	10S12505	-	10S13505	-
	80	10S12508	-	10S13508	-
	120	10S12512	-	10S13512	10S13812
	150	10S12515	10S13215	10S13515	10S13815
	180	10S12518	10S13218	10S13518	10S13818
	220	10S12522	-	10S13522	10S13822
	260	10S12526	10S13226	10S13526	10S13826
R1.5mmJ	120	10J1251215	-	10J1351215	10J1381215
	150	10J1251515	10J1321515	10J1351515	10J1381515
	180	10J1251815	10J1321815	10J1351815	10J1381815
	260	10J1252615	10J1322615	10J1352615	10J1382615
R2.0mmJ	50	10J1250520	-	10J1350520	-
	80	10J1250820	-	10J1350820	-
	120	10J1251220	-	10J1351220	10J1381220
	150	10J1251520	10J1321520	10J1351520	10J1381520
	180	10J1251820	10J1321820	10J1351820	10J1381820
	260	10J1252620	10J1322620	10J1352620	10J1382620
R3.0mmJ	50	10J1250530	-	10J1350530	-
	80	10J1250830	-	10J1350830	-
	120	10J1251230	-	10J1351230	10J1381230
	150	10J1251530	10J1321530	10J1351530	10J1381530
	180	10J1251830	10J1321830	10J1351830	10J1381830
	260	10J1252630	10J1322630	10J1352630	10J1382630

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Rígido

Curva	Comprimento (cm)	0.025" /Rígido	0.032" /Rígido	0.035" /Rígido	0.038" /Rígido
A	50	-	-	-	10A23805
	80	-	-	-	10A23808
	150	10A22515	10A23215	10A23515	10A23815
	180	10A22518	10A23218	10A23518	10A23818
	260	10A22526	10A23226	10A23526	10A23826
Reto	50	-	-	-	10S23805
	80	-	-	-	10S23808
	150	10S22515	10S23215	10S23515	10S23815
	180	10S22518	10S23218	10S23518	10S23818
	260	10S22526	10S23226	10S23526	10S23826
R1.5mmJ	150	10J2251515	-	10J2351515	10J2381515
	180	10J2251815	-	10J2351815	10J2381815
	260	10J2252615	-	10J2352615	10J2382615
R2.0mmJ	150	10J2251520	10J2321520	10J2351520	10J2381520
	180	10J2251820	10J2321820	10J2351820	10J2381820
	260	10J2252620	10J2322620	10J2352620	10J2382620
R3.0mmJ	150	10J2251530	10J2321530	10J2351530	10J2381530
	180	10J2251830	10J2321830	10J2351830	10J2381830
	260	10J2252630	10J2322630	10J2352630	10J2382630

Extra Rígido

Curva	Comprimento (cm)	0.032" /Extra Rígido	0.035" /Extra Rígido	0.038" /Extra Rígido
A	150	-	10A33515	10A33815
	180	-	10A33518	10A33818
	260	-	10A33526	10A33826
Reto	150	-	10S33515	10S33815
	180	-	10S33518	10S33818
	260	-	10S33526	10S33826
R2.0mmJ	150	-	10J3351520	-
	180	-	10J3351820	-
	260	-	10J3352620	-
R3.0mmJ	150	10J3321530	10J3351530	10J3381530
	180	10J3321830	10J3351830	10J3381830
	260	10J3322630	10J3352630	10J3382630

Ultra Rígido

Curva	Comprimento (cm)	0.032" /Ultra Rígido	0.035" /Ultra Rígido	0.038" /Ultra Rígido
R2.0mmJ	150	-	-	10J4381520
	180	-	-	10J4381820
	260	-	-	10J4382620
R3.0mmJ	150	-	10J4351530	10J4381530
	180	-	10J4351830	10J4381830
	260	-	10J4352630	10J4382630

Macio

Curva	Comprimento (cm)	0.032" /Macio	0.035" /Macio
A	50	10A03205	-
	80	10A03208	-
	120	10A03212	-
	150	10A03215	10A03515
	180	10A03218	10A03518
	220	10A03222	-
	260	10A03226	10A03526
Reto	50	10S03205	-
	80	10S03208	-
	120	10S03212	-
	150	10S03215	10S03515
	180	10S03218	10S03518
	220	10S03222	-
	260	10S03226	10S03526
R1.5mmJ	120	10J0321215	-
	150	10J0321515	-
	180	10J0321815	-
	260	10J0322615	-
R2.0mmJ	120	10J0321220	-
	150	10J0321520	-
	180	10J0321820	-
R3.0mmJ	260	10J0322620	-
	120	10J0321230	-
	150	10J0321530	10J0351530
	180	10J0321830	10J0351830
	260	10J0322630	10J0352630

AnyreachC™ & AnyreachP™

Fio-guia para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCAP)

QUALQUER LUGAR, QUALQUER ALCANCE

A APT Medical fornece uma série de recursos para o **Fio-Guia para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCAP) Anyreach** com um design Dual-Core (núcleo duplo) e Core-to-Tip (do núcleo para a ponta) para lhe oferecer um controle e uma segurança de torques superiores, deixando-o mais seguro na sua prática clínica.

Eixo de suporte: aço inoxidável

O núcleo proximal de aço inoxidável com revestimento em PTFE oferece excelente mobilidade e suporte do condutor

Design Core-to-tip (do núcleo para a ponta)

Achatar do núcleo para a ponta para melhorar a resposta tátil e mobilidade

Revestimento hidrofilizado

Revestimento hidrofilizado durável garante um avanço de baixo atrito

Do núcleo para a ponta

Aço inoxidável
Rede Segura

Núcleo de
Nitinol

Design do Dual-core (ponta de núcleo duplo)

Oferece controle superior de torque, segurança e retenção da forma



AnyreachC™

C para Bobina: a bobina de metal lhe oferece uma resposta tátil real

Uma combinação de bobina de metal, rede segura e núcleo de Nitinol fornece uma estrutura única Dual-core (núcleo duplo), maximiza a torqueabilidade e segurança, cargas de pontas diferentes disponíveis para torná-las uma escolha otimizada para a prática de seu dia a dia

Carga da ponta: 0,6g/1,0g



Carga da ponta disponível mais leve de toque leve de 0,3g para alcançar uma fina circulação colateral

Carga da ponta: 0,3g

- Comprimento rede segura: 4cm
- Bobina de aço inoxidável: 16cm
- Revestimento hidrofilizado: 55cm

AnyreachP™

P para Polímero: a sensação suave que você deseja

A manga em polímero na parte distal coberta com revestimento hidrofilizado para uma maior lubrificação para fornecer excelente rastreabilidade e capacidade de passagem nos vasos tortuosos

Carga da ponta: 0,3g/0,6g/1,0g



- Carga da ponta: 0,3g Manga de polímero: 49cm; Revestimento hidrofilizado: 55cm

Fios CTO

Carga da ponta: 3,0g/6,0g



INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Força de trabalho



AnyreachC™

REF	Carga da Ponta	Curva	Comprimento
40S018C06	1,0g	Reto	180cm
40S019C06	1,0g	Reto	190cm
40S030C06	1,0g	Reto	300cm
40A019C0634	1,0g	A (3mm 45°)	190cm
40S018B06	0,6g	Reto	180cm
40S019B06	0,6g	Reto	190cm
40S030B06	0,6g	Reto	300cm
40A019B0634	0,6g	A (3mm 45°)	190cm



AnyreachP™

REF	Carga da Ponta	Curva	Comprimento
59S018C0636	1,0g	Reto	180cm
59S019C0636	1,0g	Reto	190cm
59S030C0636	1,0g	Reto	300cm
59A019C063634	1,0g	A (3mm 45°)	190cm
59S018B0636	0,6g	Reto	180cm
59S019B0636	0,6g	Reto	190cm
59S030B0636	0,6g	Reto	300cm
59A019B063634	0,6g	A (3mm 45°)	190cm

Força de trabalho + Retrógrado



AnyreachC™

REF	Carga da Ponta	Curva	Comprimento
40S018A06	0,3g	Reto	180cm
40S019A06	0,3g	Reto	190cm
40S030A06	0,3g	Reto	300cm
40A019C0614	0,3g	A (1mm 45°)	190cm
40A030C0614	0,3g	A (1mm 45°)	300cm



AnyreachP™

REF	Carga da Ponta	Curva	Comprimento
59A019C063614	0,3g	A (1mm 45°)	190cm
59A030C063614	0,3g	A (1mm 45°)	300cm

CTO



AnyreachP™

REF	Carga da Ponta	Curva	Comprimento
59S119C0836	3,0g	Reto	190cm
59P019C2036	6,0g	Pré-moldado H	190cm

Angiopointer™

Cateter Angiográfico Hidrofilizado

TRAGA CONTROLE E LUBRIFICAÇÃO AOS SEUS PROCEDIMENTOS DIÁRIOS

Angiopointer™ Cateter Angiográfico Hidrofilizado é projetado para a Angiografia Coronária e Periférica com excelente torqueabilidade, prestações lubrificantes e design trançado por amplo lúmen interno e capacidade elevada, formas de curva múltiplas para vários procedimentos e estrutura anatômica, para adaptar-se à sua prática diária.

Aumentar gradualmente a maciez do eixo

- Maximizar a flexibilidade e a adesão do vaso
- Garante uma boa mobilidade e dirigibilidade

Ponta macia e atraumática

- Uma ponta redonda e macia reduz a irritação na parede do vaso
- Garante uma boa visualização em uma fluoroscopia

Revestimento hidrofilizado

- Prestações duráveis e lubrificadas para um avanço suave e para reduzir os traumas vasculares
- Manter o avanço do cateter fluido e estável da injeção do meio de contraste

Pebax externo


Aço inoxidável
trançado médio

Nylon interno

- Material macio para reduzir ao mínimo os danos nos vasos
- Superfície interna suave

Estrutura trançada de rede metálica

- Oferece controle de torque superior
- Equilibra a flexibilidade e resistência de torção
- Fornece amplo lúmen para uma taxa de fluxo superior

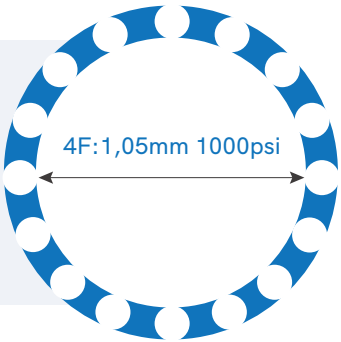

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Curva (Sem furos laterais)	4F						
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm
Reto	7740065002	7740080004	7740100006	7740110008	7740120010	-	-
TIG	-	-	11410010	-	-	-	-
JL3.5	-	-	11410005	7740110155	-	-	7740130156
JL4	-	-	11410006	7740110158	-	-	11413007
JL4.5	-	-	11410008	7740110161	-	-	7740130162
JL5	-	-	11410009	7740110164	-	-	7740130165
JR3.5	-	-	11410001	7740110170	-	-	7740130171
JR4	-	-	11410002	7740110173	-	-	11413003
JR5	-	-	11410004	7740110176	-	-	7740130177
MPA	7740065047	7740080049	11410018	-	-	7740125053	-
AL I	-	-	11410023	-	-	-	-
AL II	-	-	11410024	-	-	-	-
AL III	-	-	11410025	-	-	-	-
AR I MOD	-	-	11410021	-	-	-	-
AR II MOD	-	-	11410022	-	-	-	-
AR MOD	-	-	11410020	-	-	-	-
3DRC	-	-	11410026	-	-	-	-
TRG	-	7740080187	7740100189	7740110191	-	-	-
TRG 1	-	7740080193	7740100195	7740110197	-	-	-
TRG 2	-	7740080199	7740100201	7740110203	-	-	-

Curva (Sem furos laterais)	4F							Furos laterais
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm	
TIG	-	-	-	11411011	-	-	-	1
MPA	7740065046	7740080048	7740100050	-	-	7740125052	-	2
MPA2	-	-	11410019	-	-	-	-	2
PIG	7740065013	7740080014	7740100015	11411012	-	-	11413013	6
PIG 145°	7740065023	7740080024	7740100025	11411015	-	-	11413016	6
PIG 155°	7740065033	7740080034	7740100035	11411017	-	-	7740130037	6
PIG	7740065018	7740080019	7740100020	11411014	-	-	7740130022	8
PIG 145°	7740065028	7740080029	7740100030	7740110031	-	-	7740130032	8
PIG 155°	7740065038	7740080039	7740100040	7740110041	-	-	7740130042	8
Reto	7740065001	7740080003	7740100005	7740110007	7740120009	-	-	6
TRG	-	7740080188	7740100190	7740110192	-	-	-	1
TRG 1	-	7740080194	7740100196	-	-	-	-	2
TRG 2	-	7740080200	7740100202	7740110204	-	-	-	1
TRG 2	-	-	-	7740110198	-	-	-	2

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Curva (Sem furos laterais)	5F						
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm
Reto	7750065002	7750080004	7750100006	7750110008	7750120010	-	-
TIG	-	-	11510010	-	-	-	-
JL3.5	-	-	11510005	7750110155	-	-	7750130156
JL4	-	-	11510006	7750110158	-	-	11513007
JL4.5	-	-	11510008	7750110161	-	-	7750130162
JL5	-	-	11510009	7750110164	-	-	7750130165
JR3.5	-	-	11510001	7750110170	-	-	7750130171
JR4	-	-	11510002	7750110173	-	-	11513003
JR5	-	-	11510004	7750110176	-	-	7750130177
MPA	7750065047	7750080049	11510019	-	-	7750125053	-
AL I	-	-	11510024	-	-	-	-
AL II	-	-	11510025	-	-	-	-
AL III	-	-	11510026	-	-	-	-
AR I MOD	-	-	11510022	-	-	-	-
AR II MOD	-	-	11510023	-	-	-	-
AR MOD	-	-	11510021	-	-	-	-
3DRC	-	-	11510027	-	-	-	-
TRG	-	7750080187	7750100189	7750110191	-	-	-
TRG 1	-	7750080193	7750100195	7750110197	-	-	-
TRG 2	-	7750080199	7750100201	7750110203	-	-	-

Curva (Sem furos laterais)	5F							Furos laterais
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm	
TIG	-	-	-	11511011	-	-	-	1
MPA	7750065046	7750080048	7750100050	-	-	7740125052	-	2
MPA2	-	-	11510020	-	-	-	-	2
PIG	7750065013	7750080014	7750100015	11511012	-	-	11513013	6
PIG 145°	7750065023	7750080024	7750100025	11511015	-	-	11513016	6
PIG 155°	7750065033	7750080034	7750100035	11511017	7750120037	-	-	6
PIG	7750065018	7750080019	7750100020	11511014	-	-	7750130022	8
PIG 145°	7750065028	7750080029	7750100030	11511018	-	-	7750130032	8
PIG 155°	7750065038	7750080039	7750100040	7750110041	-	-	7750130042	8
Reto	7750065001	7750080003	7750100005	7750110007	7750120009	-	-	6
TRG	-	7750080188	7750100190	7750110192	-	-	-	1
TRG 1	-	7750080194	7750100196	-	-	-	-	2
TRG 2	-	7750080200	7750100202	7750110204	-	-	-	1
TRG 2	-	-	-	7750110198	-	-	-	2

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Curva (Sem furos laterais)	6F						
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm
Straight	7760065002	7760080004	7760100006	7760110008	7760120010	-	-
TIG	-	-	11610010	11611011	-	-	-
JL3.5	-	-	11610005	7760110155	-	-	7760130156
JL4	-	-	11610006	7760110158	-	-	11613007
JL4.5	-	-	11610008	7760110161	-	-	7760130162
JL5	-	-	11610009	7760110164	-	-	7760130165
JR3.5	-	-	11610001	7760110170	-	-	7760130171
JR4	-	-	11610002	7760110173	-	-	11613003
JR5	-	-	11610004	7760110176	-	-	7760130177
MPA	7760065047	7760080049	11610019	-	-	7760125053	-
AL I	-	-	11610024	-	-	-	-
AL II	-	-	11610025	-	-	-	-
AL III	-	-	11610026	-	-	-	-
AR I MOD	-	-	11610022	-	-	-	-
AR II MOD	-	-	11610023	-	-	-	-
AR MOD	-	-	11610021	-	-	-	-
3DRC	-	-	11610027	-	-	-	-
TRG	-	7760080187	7760100189	7760110191	-	-	-
TRG 1	-	7760080193	7760100195	7760110197	-	-	-
TRG 2	-	7760080199	7760100201	7760110203	-	-	-

Curva (Sem furos laterais)	6F							Furos laterais
	65cm	80cm	100cm	110cm	120cm	125cm	130cm	
MPA	7760065046	7760080048	7760100050	-	-	7760125052	-	2
MPA2	-	-	11610020	-	-	-	-	2
PIG	7760065013	7760080014	7760100015	11611012	-	-	11613013	6
PIG 145°	7760065023	7760080024	7760100025	11611015	-	-	11613016	6
PIG 155°	7760065033	7760080034	7760100035	11611017	-	-	7760130037	6
PIG	7760065018	7760080019	7760100020	11611014	-	-	7760130022	8
PIG 145°	7760065028	7760080029	7760100030	11611018	-	-	7760130032	8
PIG 155°	7760065038	7760080039	7760100040	7760110041	7760130042	-	-	8
Reto	7760065001	7760080003	7760100005	7760110007	7760120009	-	-	6
TRG	-	7760080188	7760100190	7760110192	-	-	-	1
TRG 1	-	7760080194	7760100196	-	-	-	-	2
TRG 2	-	7760080200	7760100202	7760110204	-	-	-	1
TRG 2	-	-	-	7760110198	-	-	-	2

March™

Cateter Guiamento


Cateter Guiamento March™ combina a torqueabilidade superior e suporte de apoio devido à estrutura trançada e material de polímero. Juntamente com a ponta macia e o design com amplo lúmen para lhe fornecer espaço para os seus procedimentos.

Ponto atraumática, radiopaca

- A ponta radiopaca e macia garante uma navegação atraumática e uma clara visibilidade

Suporte de apoio e torqueabilidade ideais

- O material de polímero com design trançado oferece uma excelente resistência à torção, suporte de apoio e resposta ao torque
- Garante uma resposta de torque 1:1 que favorece um posicionamento mais rápido do cateter com menos batidas

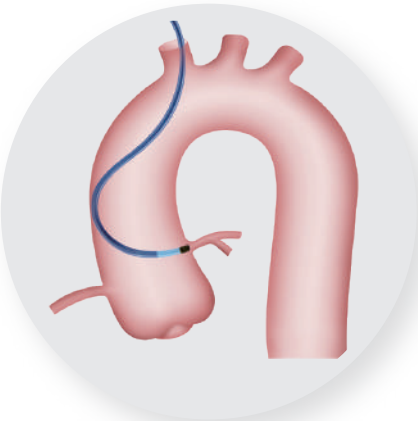

Mistura de polímero patenteada

Aço inoxidável trançado

PTFE

Ponta macia

Design de amplo lúmen

6F:0.071"

- Estrutura trançada de fio achatado para um lúmen mais amplo
- Fornece um percurso compatível e suave para múltiplos e vários dispositivos

	5 F	6 F	7 F
D.I. (Pol/mm)	0,058" / 1,47mm	0,071" / 1,80mm	0,081" / 2,06mm
D.E. (Pol/mm)	0,069" / 1,75mm	0,0815" / 2,07mm	0,093" / 2,36mm

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Curva (sem furos laterais)	5F	6F	6.5F	7F	8F
	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm
ABU3.0	53510096	53610094	53210094	53710094	53810094
ABU3.25	53510098	53610096	53210096	-	-
ABU3.5	535100100	53610098	53210098	53710096	53810096
ABU3.75	535100102	536100100	532100100	53710098	53810098
ABU4.0	535100104	536100102	532100102	537100100	538100100
XB3	53510004	53610001	53210004	53710004	53810004
XB3.5	53510008	53610002	53210008	53710008	53810008
XB4	53510012	53610003	53210012	53710012	53810012
AL0.75	53510092	53610092	53210092	53710092	53810092
AL1	53510056	53610012	53210056	53710056	53810056
AL2	53510060	53610013	53210060	53710060	53810060
AL3	53510064	53610014	53210064	53710064	53810064
AR	53510068	53610015	53210068	53710068	53810068
AR1	53510072	53610016	53210072	53710072	53810072
JL3	53510016	53610034	53210016	53710016	53810016
JL3.5	53510020	53610004	53210020	53710020	53810020
JL4	53510024	53610005	53210024	53710024	53810024
JL4.5	53510028	53610006	53210028	53710028	53810028
JL5	53510032	53610007	53210032	53710032	53810032
JR3	53510036	53610049	53210036	53710036	53810036
JR3.5	53510040	53610008	53210040	53710040	53810040
JR4	53510044	53610009	53210044	53710044	53810044
JR4.5	53510048	53610010	53210048	53710048	53810048
JR5	53510052	53610011	53210052	53710052	53810052
MPA2	53510084	53610019	53210084	53710084	53810084
XBRCA	535100110	536100127	532100108	537100106	-


Curva (com 2 furos laterais)	5F	6F		6.5F	7F	8F
	100cm	100cm	100cm*	100cm	100cm	100cm
ABU3.0	53510095	53610093	536100118	53210093	53710093	53810093
ABU3.25	53510097	53610095	536100119	53210095	-	-
ABU3.5	53510099	53610097	536100120	53210097	53710095	53810095
ABU3.75	535100101	53610099	536100121	53210099	53710097	53810097
ABU4.0	535100103	536100101	536100122	532100101	53710099	53810099
XB3	53510002	53610026	536100107	53210002	53710002	53810002
XB3.5	53510006	53610028	536100108	53210006	53710006	53810006
XB4	53510010	53610031	536100109	53210010	53710010	53810010
AL0.75	53510091	53610091	536100110	53210091	53710091	53810091
AL1	53510054	53610064	536100111	53210054	53710054	53810054
AL2	53510058	53610067	536100112	53210058	53710058	53810058
AL3	53510062	53610070	536100113	53210062	53710062	53810062
AR	53510066	53610073	-	53210066	53710066	53810066
AR1	53510070	53610076	-	53210070	53710070	53810070
JL3	53510014	53610022	-	53210014	53710014	53810014
JL3.5	53510018	53610037	-	53210018	53710018	53810018
JL4	53510022	53610040	-	53210022	53710022	53810022
JL4.5	53510026	53610043	-	53210026	53710026	53810026
JL5	53510030	53610046	-	53210030	53710030	53810030
JR3	53510034	53610023	536100125	53210034	53710034	53810034
JR3.5	53510038	53610052	536100114	53210038	53710038	53810038
JR4	53510042	53610055	536100115	53210042	53710042	53810042
JR4.5	53510046	53610058	536100116	53210046	53710046	53810046
JR5	53510050	53610061	536100117	53210050	53710050	53810050
MPA2	53510082	53610085	-	53210082	53710082	53810082
XBRCA	535100109	536100126	536100128	532100107	537100105	-

6F 100cm* com 2 LSH (o furo lateral está a 350mm da extremidade da cabeça)



UM PASSO MAIS PERTO DO SUCESSO

Apresentação do **Cateter de Guiamento da Extensão Expressman™** com camada torcida de aço inoxidável, segmento de troca rápida 35cm e **design de furos laterais** exclusivo para um melhor suporte, entrega suave e, o mais importante, fornecendo um fluxo sanguíneo anterógrado suficiente ao deparar-se com lesões complexas em uma anatomia tortuosa.

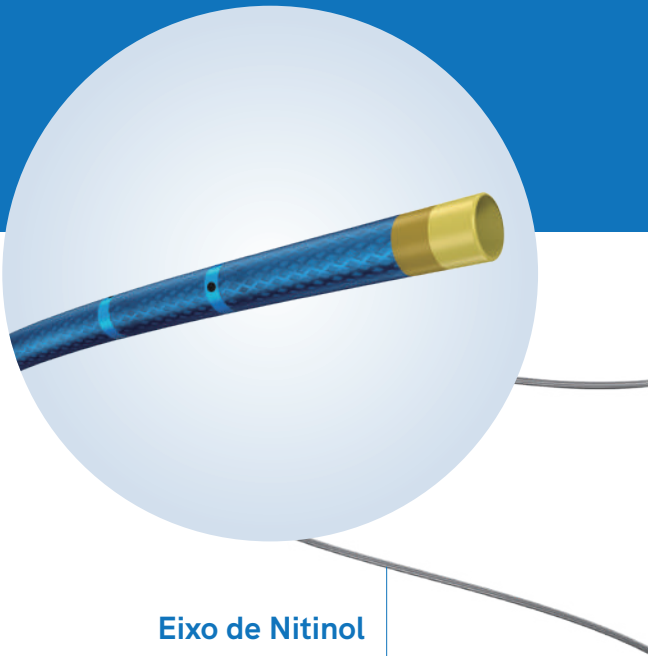

Eixo de Nitinol

Fornece uma resistência superior à torção

Revestimento hidrofílico - 35cm

Reduz a resistência quando se avança uma anatomia tortuosa

Ponta macia radiopaca

A ponta não trançada de pebax macio garante a segurança

Camada trançada em rede metálica


Oferece uma excelente capacidade de distribuição e mobilidade

Design dos furos laterais

Fornecer fluxo sanguíneo anterógrado

Porta de entrada do colar cônico

Transição suave para dispositivos de distribuição

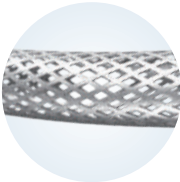

O verdadeiro design de peça única fornece um suporte de operação mais seguro

- Design de solda dupla para uma conexão mais estreita para um transporte mais seguro

Seção de troca rápida de 35cm


- Facilitar o posicionamento do stent em uma lesão longa
- Reduzir a resistência durante a distribuição



Os furos laterais únicos fornecem um fluxo sanguíneo anterógrado mesmo na artéria coronária distal

4 furos laterais com distribuição espacial a 90°

- Percurso auxiliar no tratamento de lesões longas complexas ou distais

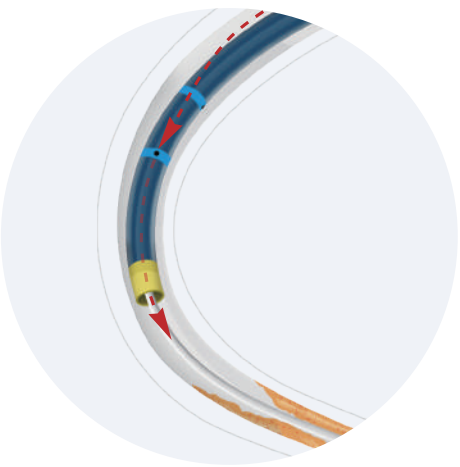

Posicionamento na lesão CTO



Posicionamento do Expressman™

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Compatibilidade do cateter de guiamento	Comprimento efetivo (cm)	D.I.	Segmento guia (cm)
20505601	6F	150	0.058"-0.050"	35
20505603	6F	150	0.056"	35
20556101	6.5F	150	0.061"	35
20606603	7F	150	0.066"	35

Sem furo lateral

REF	Compatibilidade do cateter de guiamento	Comprimento efetivo (cm)	D.I.	Segmento guia (cm)
20505602	6F	150	0.058"-0.050"	35
20505604	6F	150	0.056"	35
20606602	7F	150	0.066"-0.058"	35
20606604	7F	150	0.066"	35

Com 4 furos laterais

NAVEGAÇÃO PELOS
VASOS SELETIVOS

| Ponta Reta 1.7F/1.9F

- 1.7F Design otimizada para Navegação Retrógada CTO
- 1.9F Projetado para a navegação em ambos o Anterógrado e Retrógado CTO

Suporte Ideal

- A estrutura trançada em rede de aço inoxidável fornece um suporte excepcional do fio-guia e o manuseio do dispositivo
- Camada interna em PTFE para reduzir ao mínimo a resistência durante a operação de avanço do fio-guia

Capacidade de passagem superior

- Revestimento hidrofílico na parte distal para uma distribuição suave mesmo em uma anatomia tortuosa
- Levemente cônico permite atravessar facilmente a lesão complexa
- O multidurômetro do tubo de polímeros oferece uma transição suave e com flexibilidade.



Marcadores multi-radiopacos

- Estão disponíveis 2 ou 3 fitas de marcação para uma clara visualização

| Ponta Cônica 2.6F

Design otimizado para Lesões Calcificadas



Ponto flexível cônica

- 1.3F no distal para uma passagem mais simples através de microcanais tortuosos
- A ponta flexível com tungstênio garante uma elevada visibilidade e rastreabilidade
- Transição suave entre ponta e fio-guia

Hybrid structure


- A bobina reforçada e a estrutura híbrida trançada em rede são destinados a oferecer a capacidade de "perfuração" e controle de torque superior
- Fornece uma mobilidade e suporte excepcional para cruzar lesões calcificadas

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO


O.D. Distal	REF	Comprimento(cm)	Marcador(es)	O.D. Proximal	D.I. Distal	D.E. GW Máx	Curva
1.7F	60172316	130	1	2.3F	0,016"	0,014"	Reto
	60172311	130	1		0,015"		
	60172315	150	1		0,016"		
	60172310	150	1		0,015"		
	60172303	150	2		0,015"		
	60172317	110	1		0,016"		
	60172312	110	1		0,015"		
	60172302	170	2		0,015"		
1.9F	60192405	130	1	2.4F	0,017"	0,014"	Reto
	60192404	150	1				
	60192403	150	2				
	60192402	170	2				
2.6F	60262801	130	1	2.8F	0,0175"	0,014"	Cônico
	60262802	150	1				

UMA SOLUÇÃO EFETIVA PARA
REMOÇÃO DE TROMBOS

Cateter de Aspiração SnifferTM é um cateter de troca rápida que apresenta um lúmen amplo e mobilidade e rastreabilidade superior destinado a remover trombos efetiva e rapidamente na coronária.

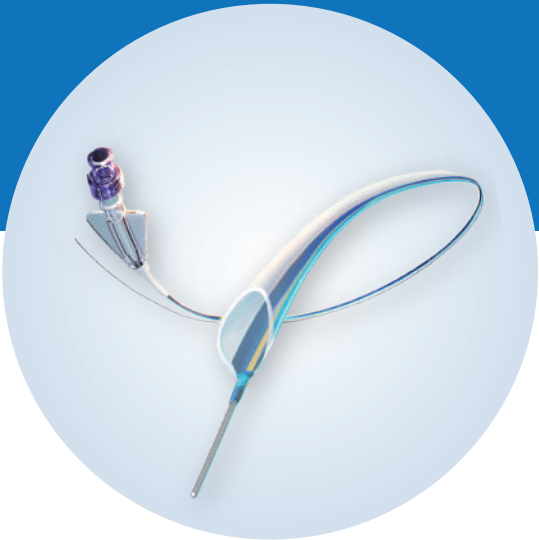


Mobilidade ideal e resistência à torção

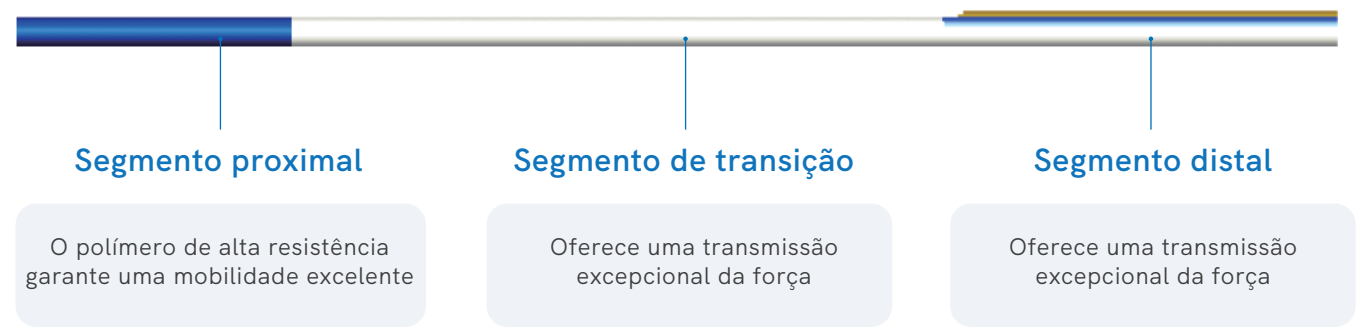



Amplo lúmen de aspiração circular para melhorar a eficiência

- Uma melhor capacidade de remoção de trombos garante uma aspiração rápida e estável

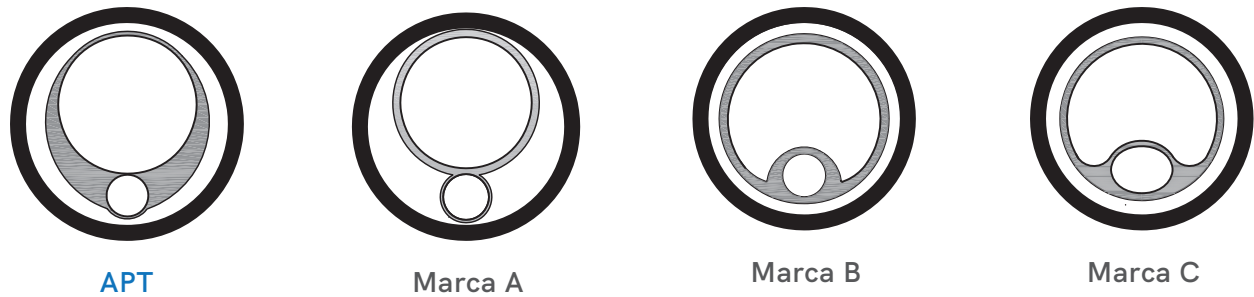

Estilete pré-carregado removível

- A maior rigidez do eixo fornece uma excelente resistência à torção, rastreabilidade e mobilidade

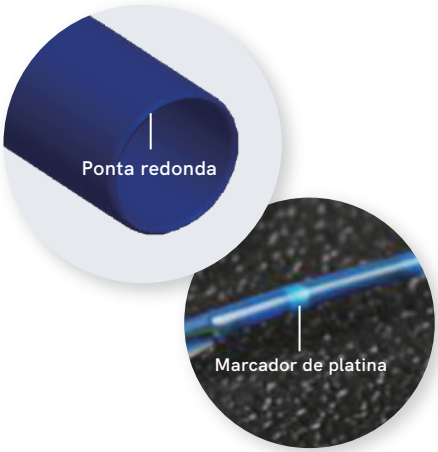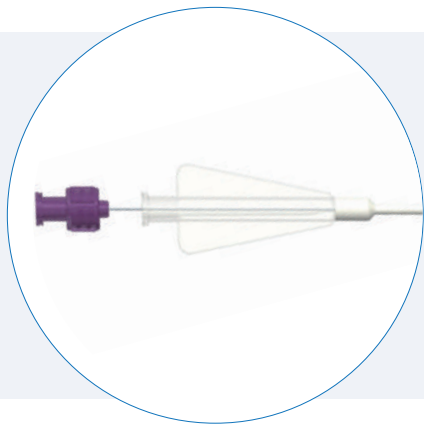


Design de ponta otimizado

- Design atraumático da ponta redonda para reduzir ao mínimo possíveis danos aos vasos
- Ponta curta de 4mm para aumentar a capacidade de passagem por uma anatomia tortuosa
- O marcador de platina fornece uma visibilidade fluoroscópica

Revestimento hidrofilizado distal

- Revestimento hidrofilizado lubrificante distal de 30cm para uma navegação suave

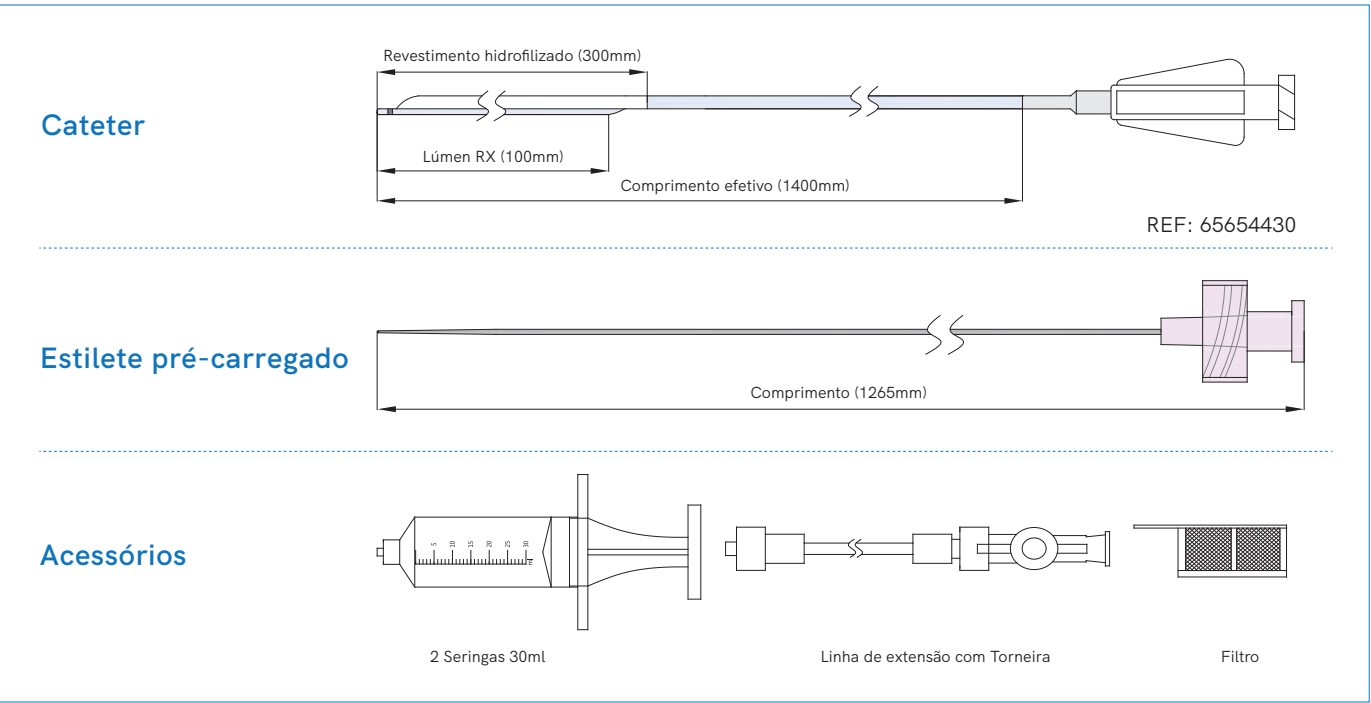

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Comprimento efetivo (cm)	D.I. Distal (mm)	D.I. Proximal (mm)	D.O. Máximo (mm)	D.I. lúmen do fio-guia	Comprimento do lúmen do fio-guia	Compatibilidade do cateter de guiamento	Furo lateral
65654402	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	200	6F	0
65654405	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	50	6F	0
65654408	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	200	6F	2
65654411	135	0.99	1.11	1.65	0.017"	50	6F	2

CONQUEROR™

Cateter-Balão de Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA)

ATRAVESSAR É ACREDITAR

Com seu perfil de entrada ultra-baixo, mobilidade e capacidade de passagem superior, alimentado por uma técnica especial de revestimento e pela construção flexível do eixo proximal, **o cateter-balão para troca rápida semicompatível CONQUEROR™** foi projetado para atravessar as lesões mais desafiadoras e melhorar a eficiência do procedimento.

Marcadores de tungstênio de platina em balão para uma excelente visibilidade

O revestimento hidrofílico seletivo reduz a resistência

Um material de balão muito mais macio garante uma maior adesão ao rastrear a complexa anatomia da artéria


A ponta macia e cônica, feita em polímero macio, garante um guia atraumático

Perfil de entrada da lesão ultra baixa para uma excelente capacidade de passagem e de nova passagem

- O perfil da ponta até 0,016" fornece uma melhor capacidade de passagem através de lesões mais difíceis
- Transição cônica suave e uniforme entre a ponta e o fio-guia para melhorar a capacidade de passagem
- A técnica especial de dobra do balão reduz o perfil de nova dobra do balão para garantir uma recuperação segura, mesmo depois de mais insuflagens

Mobilidade superior

- Combinação da flexibilidade distal do cateter e da rigidez do eixo proximal permite uma passagem de distribuição superior através de lesões complexas

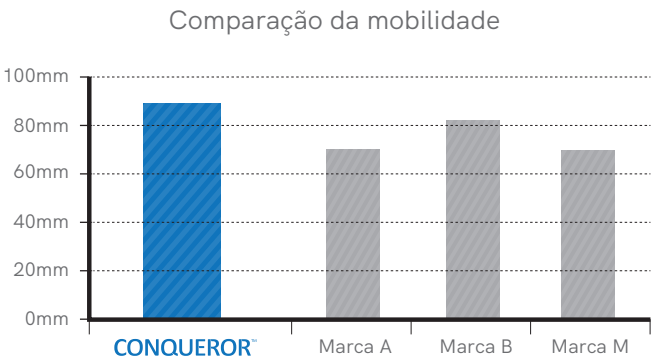

Fonte: comparação de dados do teste de bancada interna

Balão 1,0mm

- Balão de 1,0mm, design especial para lesões CTO, estenoses graves e outras lesões complexas. Melhora sensivelmente a taxa de sucesso do PCI, simplifica o processo do procedimento enquanto reduz a duração do procedimento PCI

TABELA DE ADESÃO DO BALÃO

Pressão de Insuflagem		Diâmetro do Balão (mm)												
ATM	KPa	1.00	1.25	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50	5.00
6	6 x 10 ²	0.95	1.23	1.43	1.92	2.21	2.44	2.67	2.89	3.15	3.38	3.91	4.39	4.88
8	8 x 10 ²	1.00	1.25	1.47	1.97	2.25	2.50	2.75	2.97	3.25	3.50	4.01	4.50	5.00
10	10 x 10 ²	1.06	1.27	1.51	2.03	2.33	2.57	2.81	3.04	3.33	3.61	4.12	4.65	5.15
12	12 x 10 ²	1.11	1.30	1.54	2.08	2.39	2.64	2.89	3.14	3.44	3.73	4.28	4.80	5.29
13	13 x 10 ²	1.14	1.31	1.55	2.10	2.43	2.68	2.93	3.18	3.48	3.78	4.36	4.87	5.36
14	14 x 10 ²	1.16	1.32	1.56	2.12	2.46	2.72	2.98	3.24	3.55	3.85	4.45	4.95	5.43
16	16 x 10 ²	1.20	1.34	1.59	2.16	2.53	2.80	3.07	3.34	3.66	3.97	4.64	5.09	5.59
18	18 x 10 ²	1.25	1.37	1.62	2.20	2.60	2.88	3.16	3.44	3.78	4.11			

 Pressão normal Pressão Nominal de Ruptura

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)						Nota
	6	9	12	15	20	30	
1.00	50100060	50100090	-	-	-	-	Comprimento do Eixo: 140cm
1.25	50125060	50125090	50125120	50125150	-	-	
1.50	50150060	50150090	50150120	50150150	50150200	-	
2.00	50200060	50200090	50200120	50200150	50200200	50200300	
2.25	50225060	50225090	50225120	50225150	50225200	50225300	
2.50	50250060	50250090	50250120	50250150	50250200	50250300	
2.75	50275060	50275090	50275120	50275150	50275200	50275300	
3.00	-	-	50300120	50300150	50300200	50300300	Compatível Fio-guia: 0,014
3.25	-	-	50325120	50325150	50325200	50325300	
3.50	-	-	50350120	50350150	50350200	50350300	
3.75	-	-	50375120	50375150	50375200	50375300	
4.00	-	-	50400120	50400150	50400200	50400300	
4.50	-	-	50450120	50450150	50450200	50450300	
5.00	-	-	50500120	50500150	50500200	50500300	

CONQUEROR™ Lollipop

Cateter-Balão para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) NC

O ÚNICO QUE CRUZA A TORTUOSIDADE

O **Cateter-Balão para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) CONQUEROR™ Lollipop NC** apresenta uma única ponta Lollipop™ combinada com adesão muito baixa e balão macio com revestimento selecionado, que destina-se a cruzar o vaso mais tortuoso.


Design único da ponta esférica

- A exclusiva ponta esférica evita a colisão entre o stent e o cateter-balão NC, fazendo deslizar o cateter através do stent
- Simplificar o avanço do cateter na artéria tortuosa coberta pelo stent




Capacidade de passagem ideal

- Ponta esférica macia com adição de tungstênio para garantir uma guia atraumática e uma visualização ideal
- Comparação entre a ponta cônica e esférica enquanto avanço o cateter pelo stent

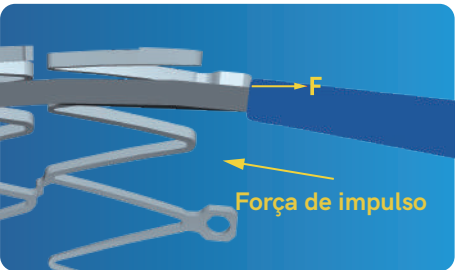

A ponta tradicionalmente cônica pode colidir contra a borda do stent

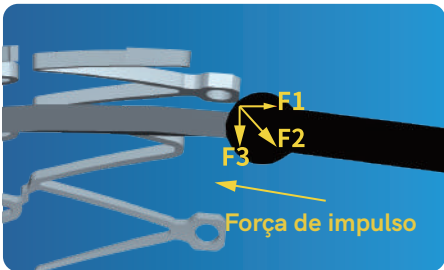

Ponta esférica única feita para deslizar facilmente através do stent em um vaso tortuoso

TABELA DE ADESÃO DO BALÃO

Pressão (ATM)	Diâmetro do Balão (mm)										
	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5
2	1.71	1.97	2.21	2.21	2.69	2.93	3.14	3.33	3.57	4.06	4.47
3	1.78	2.01	2.25	2.25	2.71	2.96	3.16	3.36	3.60	4.09	4.52
4	1.82	2.05	2.28	2.28	2.74	2.99	3.19	3.39	3.63	4.13	4.57
5	1.85	2.08	2.31	2.31	2.78	3.03	3.23	3.44	3.67	4.18	4.62
6	1.88	2.11	2.35	2.35	2.82	3.07	3.28	3.49	3.71	4.23	4.67
7	1.91	2.15	2.39	2.39	2.86	3.11	3.33	3.55	3.76	4.28	4.72
8	1.93	2.17	2.41	2.41	2.89	3.14	3.37	3.60	3.82	4.33	4.79
9	1.94	2.19	2.43	2.43	2.92	3.17	3.41	3.64	3.88	4.38	4.84
10	1.96	2.21	2.46	2.46	2.95	3.20	3.44	3.68	3.92	4.43	4.90
11	1.98	2.23	2.48	2.48	2.98	3.23	3.47	3.72	3.97	4.47	4.95
12	2.00	2.25	2.50	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.01	4.51	5.00
13	2.01	2.26	2.52	2.52	3.03	3.28	3.53	3.78	4.05	4.55	5.06
14	2.03	2.29	2.54	2.54	3.05	3.30	3.56	3.82	4.08	4.59	5.11
15	2.04	2.30	2.56	2.56	3.08	3.33	3.59	3.85	4.12	4.63	5.18
16	2.06	2.32	2.58	2.58	3.11	3.36	3.62	3.88	4.15	4.69	5.23
17	2.07	2.34	2.60	2.60	3.13	3.38	3.66	3.91	4.18	4.75	5.29
18	2.09	2.36	2.63	2.63	3.16	3.41	3.69	3.95	4.22	4.81	5.36
19	2.11	2.38	2.65	2.65	3.19	3.44	3.72	3.98	4.25		
20	2.13	2.41	2.68	2.68	3.13	3.47	3.76	4.02	4.29		

 Pressão normal Pressão Nominal de Ruptura

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

Comprimento	6mm		8mm		12mm		15mm		20mm		30mm	
	Ponta esférica	Ponta cônica	Ponta esférica	Ponta cônica	Ponta esférica	Ponta cônica	Ponta esférica	Ponta cônica	Ponta esférica	Ponta cônica	Ponta esférica	Ponta cônica
2.00	41200061	41200060	41200081	41200080	41200121	41200120	41200151	41200150	41200201	41200200	41200301	41200300
2.25	41225061	41225060	41225081	41225080	41225121	41225120	41225151	41225150	41225201	41225200	41225301	41225300
2.50	41250061	41250060	41250081	41250080	41250121	41250120	41250151	41250150	41250201	41250200	41250301	41250300
2.75	41275061	41275060	41275081	41275080	41275121	41275120	41275151	41275150	41275201	41275200	41275301	41275300
3.00	41300061	41300060	41300081	41300080	41300121	41300120	41300151	41300150	41300201	41300200	41300301	41300300
3.25	41325061	41325060	41325081	41325080	41325121	41325120	41325151	41325150	41325201	41325200	41325301	41325300
3.50	41350061	41350060	41350081	41350080	41350121	41350120	41350151	41350150	41350201	41350200	41350301	41350300
3.75	41375061	41375060	41375081	41375080	41375121	41375120	41375151	41375150	41375201	41375200	41375301	41375300
4.00	41400061	41400060	41400081	41400080	41400121	41400120	41400151	41400150	41400201	41400200	41400301	41400300
4.50	41450061	41450060	41450081	41450080	41450121	41450120	41450151	41450150	41450201	41450200		
5.00	41500061	41500060	41500081	41500080	41500121	41500120	41500151	41500150	41500201	41500200		

CONQUEROR™ Trap

Cateter-Balão de Aprisionamento

APRISIONAMENTO CONFIÁVEL PARA TROCA DE DISPOSITIVO

Cateter-Balão de Aprisionamento CONQUEROR™ Trap é destinado para a troca cômoda de dispositivo, prendendo o fio-guia para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) quando o dispositivo estiver se retraindo, com um design de alta qualidade, pode fornecer um aprisionamento estável e manter a posição do fio-guia e uma excelente visibilidade.

Design do cateter espiral

Rigidez descendente para equilibrar a mobilidade e a flexibilidade

Mobilidade melhorada

Empurrador de aço inoxidável com boa mobilidade

Alta pressão

O elevado RBP do balão garante que o fio-guia seja aprisionado e estabilizado de modo seguro

Visibilidade superior

Marcador de platina-irídio para uma clara visibilidade sob raios X

Ponta incorporado no fio


Fora do fio para alcançar rapidamente a posição alvo

- Pressão Nominal: 8 atm
- Pressão Nominal de Ruptura: 14 atm





Técnica de aprisionamento para manter a posição do fio-guia


O balão de aprisionamento dentro da extremidade distal do cateter de guiamento “prende” o fio-guia para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) quando o microcateter é retraído, mantendo a posição do fio estabilizada.

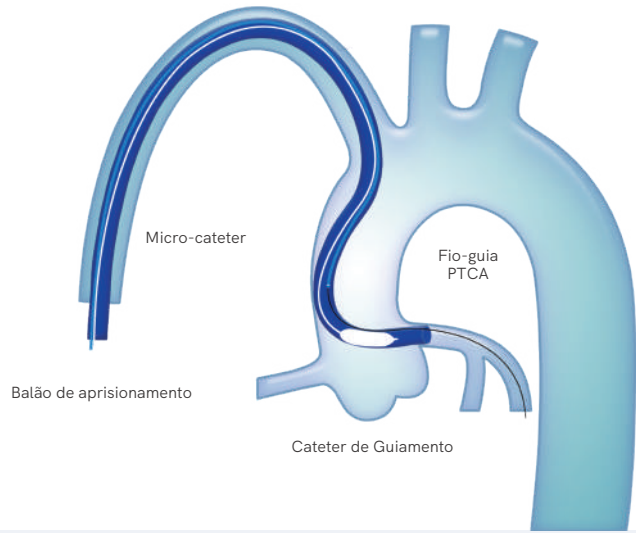

Adesão do balão de aprisionamento

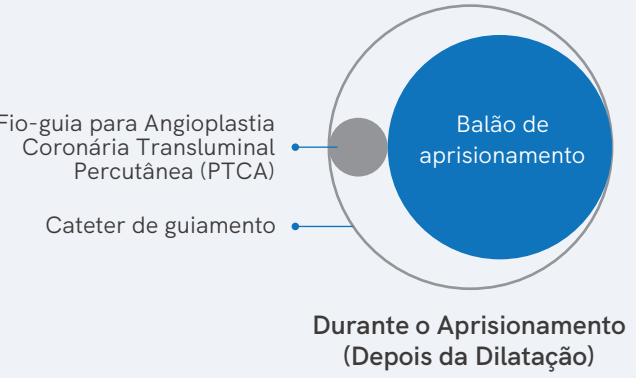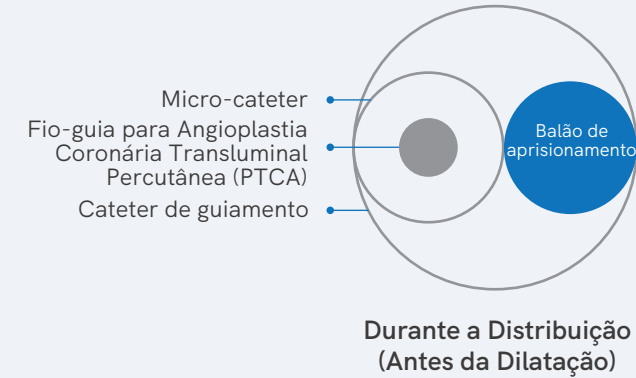

O perfil de passagem 2.0F permite a troca de um microcateter de lúmen duplo no cateter de guiamento 6F

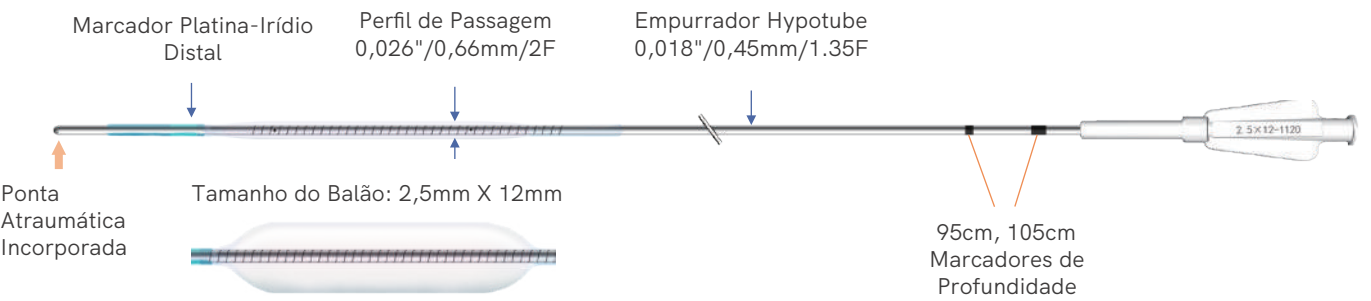

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	D.E. Do Eixo	Perfil de passagem	Diâmetro do balão	Comprimento do balão	Comprimento de trabalho	Nº mero de marcador(es) de profundidade	Compatibilidade do cateter de guiamento
38250121	1.3F	2.0F	2.5mm	12mm	112cm	2	100cm

SealingPro™

Conector Y

CONECTOR EM Y TIPO PUSH-PULL COM VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ROTAÇÃO

» Empurrar para desbloquear, puxar para bloquear

Fácil de usar e boa hemostase com válvula segura para bloquear/abrir

» ID Nominal: 10F


Ampla luz para distribuição do dispositivo

» Tipo ultra curto

Garantir um comprimento de extensão suficiente dos dispositivos no vaso

» Resistência a altas pressões

Máximo de 800psi através da válvula de segurança

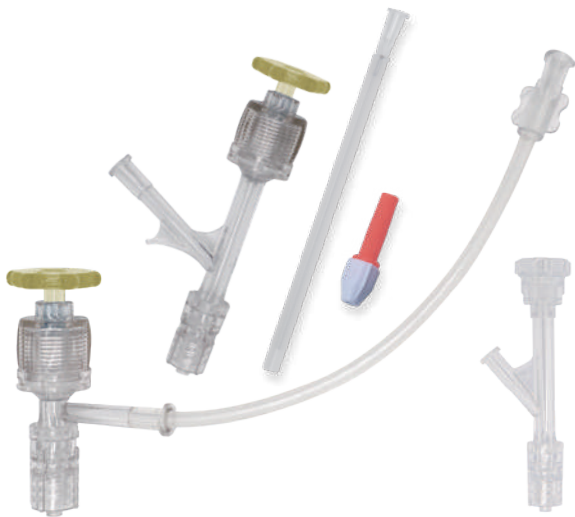


INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Conector Y			Introdutor	Dispositivo de torque	Tubo de extensão
	Comprimento (mm)	D.I. (mm)	Quantidade			
18601100	60	3.4(10F)	1	•	•	
18821200	82	3.4(10F)	1	•	•	•
18891200	89	3.4(10F)	1	•	•	•
18992200	99	3.4(10F)	1	•	•	•


Enlarger™

Dispositivo de Insuflação

- Design ergonômico da manilha para um controle da insuflação fácil e rápida
- Manômetro fosforescente para visualização em ambientes com pouca luz
- A seringa de 20ml e pressão máxima de 30atm se adequam a todos os procedimentos de dilatação

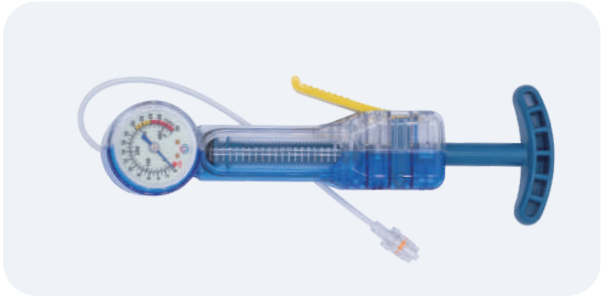

Bloquear

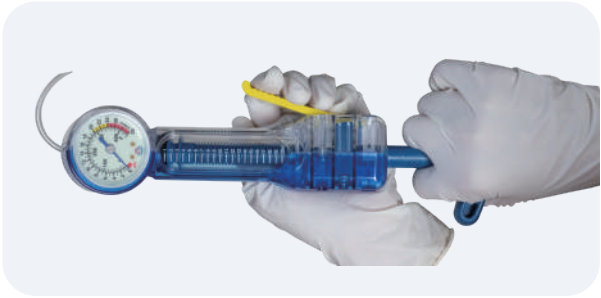

Liberar

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Volume(ml)	Pressão (atm/psi)	Torneira
192030S	20	30/440	•
193030S	30	30/440	•



UM LAÇO, FIXA TUDO

Para recuperar os filtros venosos e objetos estranhos no pedículo vascular

- » Excelente visibilidade e retenção da forma
Alça: Bobina de tungstênio dourada sobre os fios de nitinol
Cateter de distribuição: Marcador Pt. Distal para localização precisa
- » Minimizar o atrito e maximizar a torqueabilidade
Empurrador: PTFE no eixo de nitinol

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO

REF	Diâmetro da alça (mm)	Comprimento do laço (cm)	D.O. Cateter (mm)	Comprimento do cateter (mm)
57151250*/57151251	15	125	2.06 (6F) /-	102 /-
57201250*/57201251	20	125	2.06 (6F) /-	102 /-
57250650*/57250651	25	65	2.06 (6F) /-	48 /-
57251250*/57251251	25	125	2.06 (6F) /-	102 /-

* Kit com cateter de distribuição



6.5F SET


Introdutor Hemostático e Cateter de Guiamento

POR QUE ESCOLHER O GRUPO APT 6.5F?


A prevalência cada vez maior dos complexos PCI e CTO provoca uma crescente demanda de cateteres guia maiores para serem inseridos em mais dispositivos. Entretanto, é recomendável usar a bainha do introdutor 7F e o cateter guia através da artéria femoral. O grupo 6.5F fornece uma solução alternativa à abordagem através da artéria femoral com uma luz interna maior do cateter guia.

Introdutor para Hemostasia 6.5F: Design com parede fina


A bainha do introdutor 6.5F Braidin™ é destinada a combinar com o cateter de guiamento 6.5F. A sua estrutura trançada em aço inoxidável fornece um diâmetro externo semelhante à bainha do introdutor convencional de 6F, mas com um diâmetro interno maior de 0.5F.

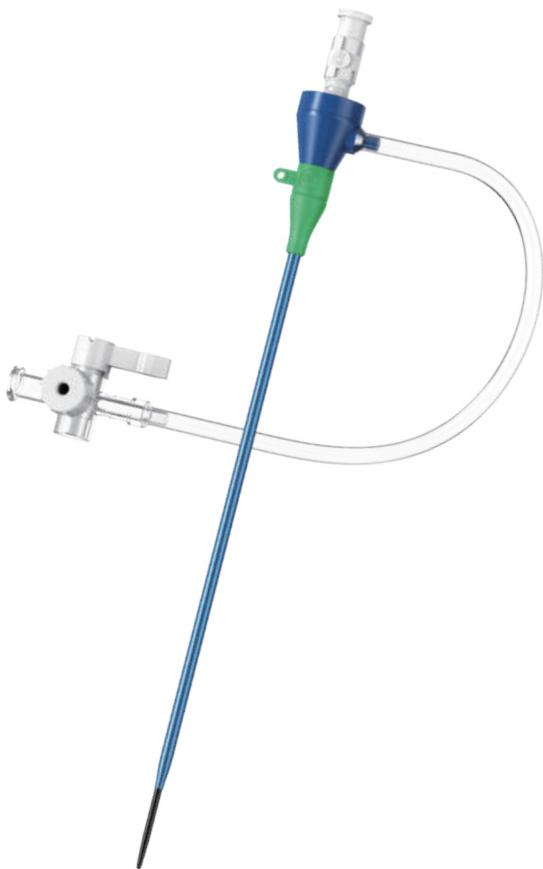

Diâmetro externo semelhante, lúmen interno maior


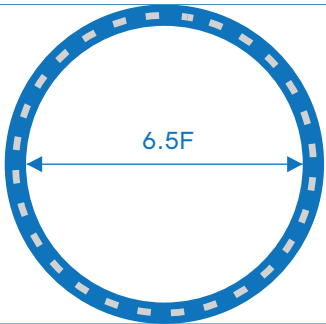


Braidin™ 6.5F

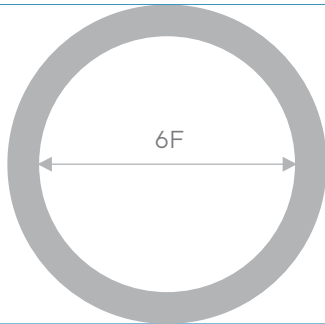

6F Convencional

Comparação da parede do introdutor hemostático

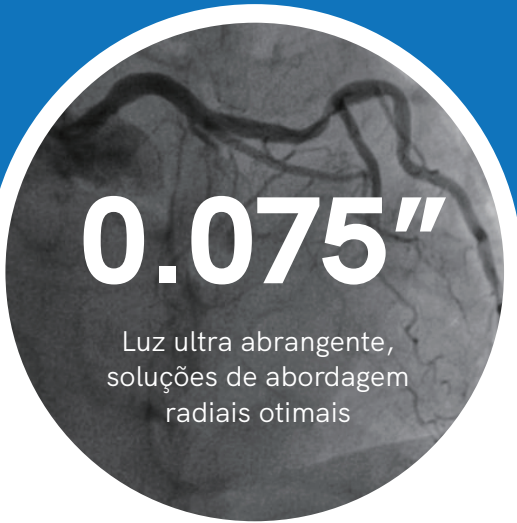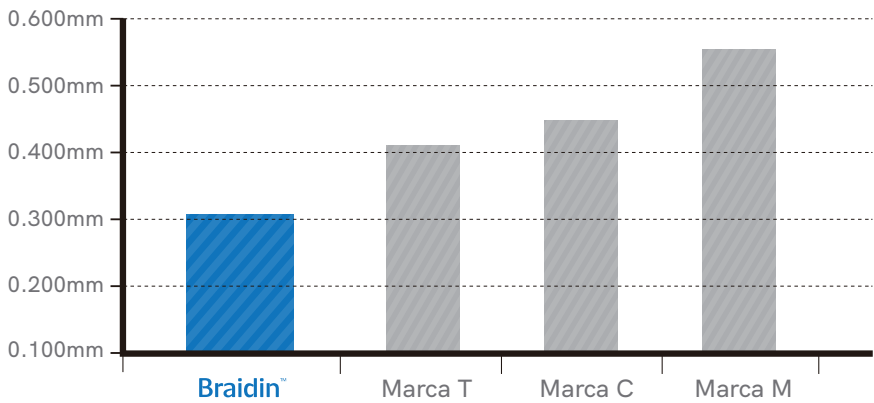

0.075"

Luz ultra abrangente, soluções de abordagem radiais ótimas

Cateter de Guiamento 6,5F: lúmen grande de 0,075"

Cateter de guiamento 6.5F March™ com lúmen amplo de 0,075", em relação aos cateteres-guia 6F com diâmetro interno de 0,071", o espaço extra no lúmen torna o 6.5F March™ compatível com um número maior de dispositivos. Ele também reduz o atrito na passagem de múltiplos dispositivos (ex.: Técnica Sobreposição do Balão).




O conjunto 6.5F lhe oferece mais

Meio FreeSync maior com uma grande diferença para você e seus pacientes



Introdutor e cateter-guia 6.5F APT

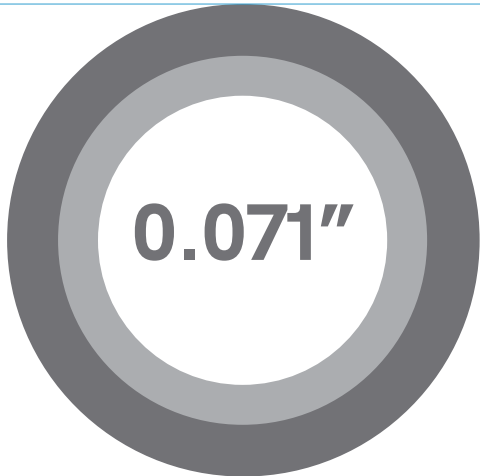

Introdutor convencional e cateter de guiamento 6F

Solução otimizada para a intervenção trans radial

Compatível com mais dispositivos interventores, entre os quais a uterectomia com rotocélula, técnica de sobreposição com duplo balão ou stents, abrange uma variedade de exigências clínicas e desafia as lesões complexas.

Compatível	Introdutor hemostático 6.5F APT e cateter de guiamento	Introdutor convencional 6F e cateter de guiamento
Balão e Stent	Todas as marcas	Todas as marcas
Stent e Stent	Todas as marcas	Não para todas as marcas
Cateter IVUS	Todas as marcas	Todas as marcas
Cateter para Trombectomia	Todas as marcas	Todas as marcas
Rotablator	≤1,75mm	<1,5mm